



MOViLO

Chaussure de confort thérapeutique

Let's go!

DARCO



Qu'est-ce qui ne va pas ?

- > Vous êtes souvent debout et vous attachez de l'importance à une marche saine et sans douleur ?
- > Vous avez des problèmes avec vos pieds et des difficultés à trouver la bonne chaussure ?
- > Vous cherchez des chaussures confortables avec suffisamment de place pour vos semelles orthopédiques individuelles ?
- > Vous souhaitez des chaussures confortables affichant en même temps un look chic ?

Alors – Let's go !

Nos chaussures de confort thérapeutiques Movilo Fly et Movilo Street vous offrent suffisamment de place, sont extrêmement confortables, agréables à porter et ont en plus un look très tendance. Les chaussures Movilo de DARCO vous assistent au travail et dans le quotidien actif.





Trouvez la
taille qui vous
convient

Movilo® Fly



Coloris	Taille
Black	36 – 47
Blue	36 – 47
Lilac	36 – 43
Petrol	36 – 47

Movilo® Street



Coloris	Taille
White	36 – 47
Olive	36 – 47

Remarque légale

DARCO ne pratique pas dans le domaine médical et ne donne pas de recommandations pour l'utilisation spécifique chez le patient. Les professionnels de la santé sont responsables, dans chaque cas individuel de patient, de la détermination du moyen auxiliaire approprié et de la mise en œuvre du traitement adéquat. DARCO décline toute responsabilité à cet égard.



Caractéristiques



SEMELLE EXTÉRIEURE

- > Barre de déroulement décalée vers l'arrière
 - Décharge de l'avant-pied
- > Revêtement en caoutchouc résistant à l'abrasion sur une grande surface (3 mm)
 - Antidérapant
- > Construction de la semelle amortissant les chocs et absorbant les forces
- > Renfort semi-rigide continu du fond de la chaussure
 - Décharge de l'avant-pied
- > Surface d'appui longue et sûre
- > Faible rebond (11 mm)



SYSTÈME DE SEMELLE INTÉRIEURE

- > Semelle orthopédique en 2 parties avec une hauteur totale de 8 mm
 - Semelle intérieure anatomique (6 mm)
 - Guidage modéré du talon
 - Léger soutien de la voûte longitudinale et transversale
 - Semelle PU recouverte de microfibres lisses pour un bon amorti + facilité d'enfilage
 - Semelle de réserve (2 mm)
 - Pour la compensation du volume
 - Amortissement supplémentaire
- > Interchangeable
- > Espace suffisant (8 mm) pour des semelles personnalisées
- > Utilisable individuellement



TIGE

- > Respirant
- > Pointe du pied renforcée
- > Découpe anatomique de la cheville
 - Ajustement idéal de l'arrière-pied
- > Contrefort ajusté de manière optimale
 - Maintien bon et sûr du talon
- > Boucle au niveau du talon
 - Facilité d'enfilage

Modèle Fly



- > Boucle au niveau de la languette de la chaussure
 - Facilité d'enfilage
- > Sans doublure intérieure
 - Minceur
 - Souplesse
 - Perméabilité à l'air

Modèle Street




- > Tige indéformable
- > Doublure intérieure souple
 - Bon rembourrage
 - Protection contre la pression et les influences extérieures
 - Confort de port élevé



FORME DE CHAUSSURE « PINE »

- > Conception de la forme adaptée au pied
- > Largeur idéale de la plante du pied
- > Hauteur de la zone des orteils 21,5 – 27 mm (selon taille)
- > Développé en coopération avec Wiest GmbH

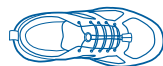

LAÇAGE

- > Lacets élastiques avec fermeture rapide
 - Facile à mettre et à enlever
- > Lacets plats non élastiques (fournis)
 - Meilleur maintien
- > Trou pour lacets supplémentaire
 - Ajustement plus ferme



Indications

Pour le traitement des problèmes au niveau des pieds

en cas de :

- > Déformations modérées du pied / des orteils comme p. ex. hallux valgus, orteils en marteau et en griffe
- > Hallux rigidus
- > Métatarsalgie
- > Névrome de Morton
- > Polyarthrite rhumatoïde
- > Polyarthrite, arthrose, goutte
- > Fasciite plantaire / Épine calcanéenne
- > Formation de cals, prévention des panaris
- > Diabète sans PNP / AOP (groupe de risque 0 selon l'Association allemande du diabète)



DARCO (Europe) GmbH | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 8807 9228-0 | Fax -22 | info@darco.de | www.darco.de/fr



2024-06-21