



MOViLO

Therapeutischer Komfortschuh

Let's go!

DARCO



Wo drückt der Schuh?

- > Sie sind viel auf den Beinen und legen Wert auf gesundes, schmerzfreies Gehen?
- > Haben Sie Probleme mit Ihren Füßen und Schwierigkeiten den richtigen Schuh zu finden?
- > Suchen Sie Komfortschuhe mit ausreichend Platz für Ihre individuellen Einlagen?
- > Wünschen Sie sich gemütliche Schuhe, die gleichzeitig chic aussehen?

Na dann – Let's go!

Unsere therapeutischen Komfortschuhe Movilo Fly und Movilo Street bieten Ihnen ausreichend Platz, sind äußerst bequem, komfortabel zu tragen und sehen dabei auch noch trendig aus. Die Movilo Schuhe von DARCO unterstützen Sie im Beruf und im aktiven Alltag.





Finden Sie
Ihre passende
Größe

Movilo® Fly



Farben	Größe
Black	36 – 47
Blue	36 – 47
Lilac	36 – 43
Petrol	36 – 47

Movilo® Street



Farben	Größe
White	36 – 47
Olive	36 – 47

Rechtlicher Hinweis

DARCO praktiziert weder im medizinischen Bereich, noch gibt DARCO für die spezifische Anwendung am Patienten Empfehlungen. Das fachärztliche Personal ist in jedem individuellen Patientenfall für die Bestimmung des passenden Hilfsmittels und die Durchführung der angemessenen Behandlung verantwortlich. DARCO übernimmt hierfür keine Verantwortung.



Eigenschaften



AUSSENSOHLE

- > Rückverlagerte Ballenrolle
 - Vorfußentlastung
- > Großflächige, abriebfeste Gummierung (3 mm)
 - Rutschhemmend
- > Stoßdämpfende, kraftabsorbierende Sohlenkonstruktion
- > Durchgehende, semirigide Schuhbodenversteifung
 - Entlastung des Vorfußes
- > Lange und sichere Standfläche
- > Geringe Sprengung (11 mm)



INNENSOHLENSYSTEM

- > 2-teilige Bettung mit 8 mm Gesamthöhe
 - Anatomisch geformte Fußbettung (6 mm)
 - Moderate Fersenführung
 - Leichte Längs- und Quergewölbestütze
 - PU-Sohle mit glattem Mikrofaserbezug für gute Dämpfung + leichten Einstieg
 - Platzhalter-Sohle (2 mm)
 - Zum Volumenausgleich
 - Zusätzliche Dämpfung
- > Austauschbar
- > Ausreichend Platz (8 mm) für individuell angefertigte Einlagen
- > Individuell einsetzbar



LEISTEN MOVILO®

- > Fußgerechte Leistenform
- > Ideale Ballenbreite
- > Zehenboxhöhe 21,5 – 27 mm (je nach Größe)
- > Entwickelt mit der Wiest GmbH



SCHAFT

- > Luftdurchlässig
- > Verstärkte Fußspitze
- > Anatomischer Knöchelausschnitt
→ Ideale Rückfußpassform
- > Optimal angepasste Fersenkappe
→ Guter, sicherer Fersenhalt
- > Schlaufe an der Ferse
→ Leichtes Anziehen


Modell Fly

- > Schlaufe an der Schuhzunge
→ Leichtes Anziehen
- > Ohne Innenfutter
→ Schlank
→ Weich
→ Atmungsaktiv



Modell Street

- > Formstabiles Obermaterial
- > Weiches Innenfutter
→ Gute Polsterung
→ Schutz vor Druck und
äußeren Einflüssen
→ Hoher Tragekomfort

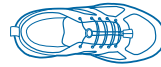

SCHNÜRUNG

- > Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
→ Leichtes An- und Ausziehen
- > Unelastische, flache Schnürsenkel (beiliegend)
→ Besserer Halt
- > Zusätzliches Schnürsenkel-Loch
→ Festerer Sitz



Indikationen

Zur Therapie von Fußbeschwerden bei:

- > Moderaten Fuß- / Zehendeformitäten wie
z. B. Hallux Valgus, Hammer- und Krallenzehen
- > Hallux Rigidus
- > Metatarsalgie
- > Morten-Neurom
- > Rheumatischer Arthritis
- > Polyarthrit, Arthrose, Gicht
- > Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- > Kallusbildung, Prophylaxe von Panaritium
- > Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK (Risikogruppe 0
nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)



DARCO (Europe) GmbH | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Tel. +49 8807 9228-0 | Fax -22 | info@darco.de | www.darco.de



2024-08-20